




ケアする人まで、ケアする技術。

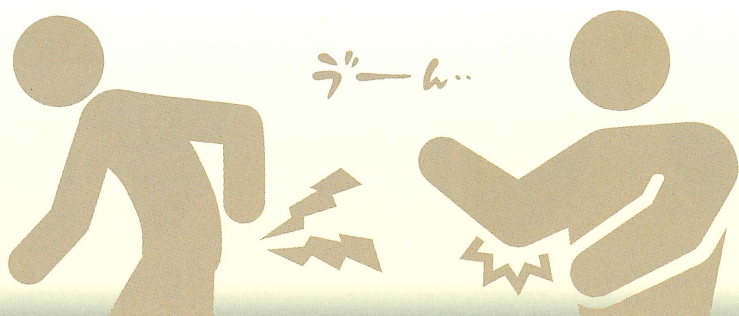

DUNLOP

Dun-Slope *AiR2*

業界
最軽量
※1
クラス

Dun-Slope *AiR2*

×

HIGH-PERFORMANCE CARBON FIBER
TORAYCA

ダンスロープAiR2は東レの高機能炭素繊維を使用しています



介助者の負担を **軽さ** で
サポート

他社製スロープに比べ、
**腰の筋活動量
約19%軽減** ※2

他社製スロープに比べ、
**腕の筋活動量
約23%軽減** ※2

※2 北海道大学 大学院情報科学研究科 田中教授の研究
室にて測定対象スロープ：285cm サイズ
被験者：腰部 9 名 腕部 10 名

【検証方法】

スロープ設置と撤去作業時の腰部と腕部（右腕浅指屈筋/
上腕二頭筋）への筋活動量減少率を測定

【検証結果】

腰部：設置時／平均20.3%減

撤去時／平均18.2%減の平均値

腕部：設置時／右腕浅指屈筋 平均26.6%減、

上腕二頭筋 平均27.6%減

撤去時／右腕浅指屈筋 平均24.0%減、

上腕二頭筋 平均17.0%減の平均値

※1 JIS 認証された車いす用可搬形スロープに
おいての他社比較（2023年8月自社調べ）

Dun-Slope AiR2 の選び方

より安全にお使いいただくため、状況が許す限り、傾斜が緩くなるスロープをお選びいただくことを推奨します。



介助者不要
自走可能傾斜

傾斜角 約 **5°**

段差の約12倍の
長さのスロープ

車いすではほぼ自走できる傾斜

介助者必要
基本傾斜

傾斜角 約 **10°**

段差の約6倍の
長さのスロープ



介助して車いすを走行する場合の
基本となる傾斜

介助者必要
最大傾斜

傾斜角 約 **14°**

段差の約4倍の
長さのスロープ

かなりの急勾配。これ以上の傾斜での
ご使用は危険ですのでお止めください

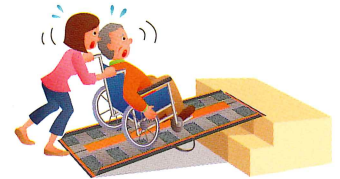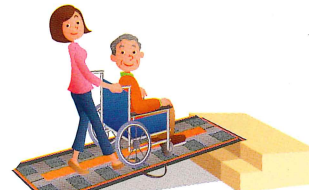

適応段差(cm)と使用形態の目安

自走可能傾斜(約5°)

基本傾斜(約10°)

最大傾斜(約14°)

サイズラインナップ	R-285Z	23cm	46cm	70cm
	R-255Z	20cm	41cm	62cm
	R-230Z	18cm	37cm	56cm
	R-205Z	16cm	33cm	50cm
	R-165Z	13cm	26cm	40cm
	R-125Z	10cm	20cm	30cm
	R-85Z	6cm	13cm	20cm

Dun-Slope AiR2 仕様詳細

商品名			R-285Z	R-255Z	R-230Z	R-205Z	R-165Z	R-125Z	R-85Z
仕様	長さ（走行面）		285cm	255cm	230cm	205cm	165cm	125cm	85cm
	幅	使用時	69.6cm			69.4cm			69.6cm
		有効幅	69.0cm						
		収納時	34.8cm			34.7cm			34.8cm
	収納時の厚み		10.8cm						
	本体質量		約11.5kg	約10.5kg	約9.6kg	約8.5kg	約7.0kg	約5.7kg	約4.3kg
	梱包サイズ（cm）		長さ287× 奥行40×高さ16	長さ257× 奥行40×高さ16	長さ232× 奥行40×高さ16	長さ207× 奥行40×高さ16	長さ167× 奥行40×高さ16	長さ127× 奥行40×高さ16	長さ87× 奥行40×高さ16
	梱包質量		約14.8kg	約13.5kg	約12.4kg	約11.1kg	約9.3kg	約7.6kg	約5.8kg
	側壁 （エッジ）	高さ	2.7cm						
		幅	0.34cm			0.26cm			0.34cm
最大耐質量		300kg							
最大適応段差（傾度14度）		70cm	62cm	56cm	50cm	40cm	30cm	20cm	
素材		カーボンFRP / ポリカーボネート							
品番			05566	05567	05568	05569	05570	05571	05572
JANコード（4904510）			555660	555677	555684	555691	555707	555714	555721
TAISコード			00532-000048	00532-000049	00532-000050	00532-000051	00532-000052	00532-000053	00532-000054
メーカー希望小売価格 （税込）			375,100円	326,700円	290,400円	254,100円	205,700円	169,400円	121,000円

製造元 住友ゴム工業株式会社

販売元 株式会社 **ダンロップ ホームフロタクト** 本社: 〒541-0059 大阪市中央区博労町4-6-10(ハニービル) TEL.06(6120)7323 FAX.06(6120)7327

ダンスロープエアー2 仕様変更のご案内



拝啓、貴社益々ご清栄のこと、心よりお慶び申し上げます。
平素は格別なご高配を賜り、誠に厚く御礼申し上げます。
さて、このたび、ご愛顧いただいておりますダンスロープエアー2につきまして、一部仕様変更を行いますので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

- 1、対象商品
ダンスロープエアー2 全サイズ
- 2、変更点
- ①上端、下端ゴムの形状変更
→下記参照
 - ②走行面滑り止めシートの間隔変更
→現行品より間隔を狭くしました。
 - ③エッジ部(側壁)ゴムの材質変更
→耐候性の強い素材に変更します。

画像、イメージ図(上下端ゴム)

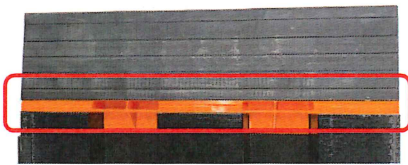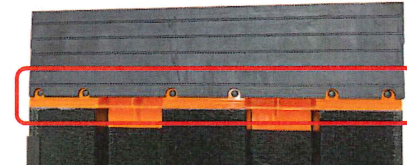	現行	変更後
裏側	 水抜き穴が上下端ゴムでふさがっている	 水抜き穴の部分のみ露出し、穴はキャップ留め
側面	 先端側面にゴムがない形状	 先端を被せる形状

- 3、切替時期
- 自然切替とし、現在の在庫状況等より7月中旬から8月頃に切替わる予定です。
サイズによって時期は異なりますので、在庫状況等については、弊社担当者までお問合せ下さい。
尚、メーカー品番・JANコード・TAISコードの変更はございません。

- 4、その他
- ①補修部品の販売について
→補修部品は5月より販売予定です。
尚、仕様変更に伴い下記、品番の補修部品は在庫限りで廃番となります。

5643 走行面すべり止めシート(ブラック)
5644 上端用ゴム(エアー2用)
5645 下端用ゴム(エアー2用)
5646 エッジ部保護用ゴム(オレンジ) ※R-285Z～R-230Z、R-85Z用
5652 エッジ部保護用ゴム(オレンジ) ※R-205Z～R-125Z用

- ②メーカー修理依頼について
→5月に修理実施のご回答(ご発注)分より、変更後の仕様での修理となります。

※詳細につきましては担当営業にお問合せください。

以上